

1. Introduction

You have just received the Wireless Floor alarm by Vahlkamp. We will first point out the advantages of this system before providing directions for the installation and use.

PLUSPUNTEN

The wireless Floor alarm is a user friendly product and it offers the following advantages:

- * **Extensive testing possibilities / battery check.**
 - The switch is turned ON: the LED lights up in red for an instant
 - The contact with the mat is made: the LED will light up for 5 seconds.

- * **No inconvenient cords or wires.**

The Chair alarm is wireless. And so the chair can be positioned at a distance of 5 to 10 metres from the nurse alarm system. You will not be hindered by cords or wires on the floor.

1.1 Components

The wireless Floor alarm consists of the following components (see illustration 1):

1. **Transmitter unit** with on/off switch
2. **Receiver unit**, with 220-240 Volt adapter and cable for connection with the nurse call system
3. **Floor mat**, grey mat 55 x 55 cm with accompanying cable and plug and with non-slip underneath.

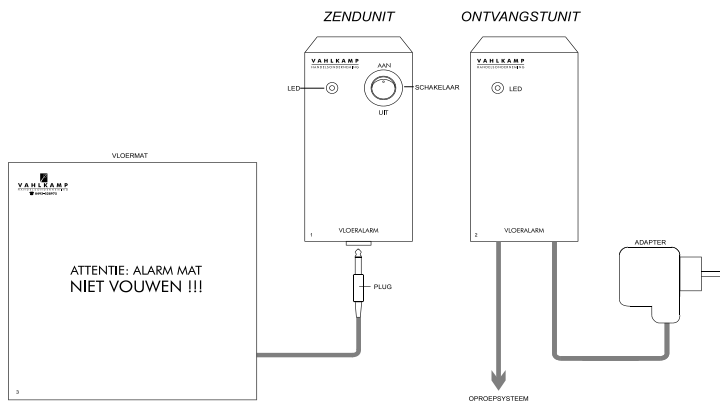


Illustration 1: Components wireless Floor alarm

2. Installation

2.1 Receiver unit

You are to connect the grey cable to a plug that is suitable for your nurse alarm system.

The following connections apply to the grey cable:

- brown: NO
- green: NC
- white: COM

Example:

If your nurse alarm system has a make-contact, then connect white and brown.

You are to connect white and green in the case of a breaker contact.

The transmitter unit must then be permanently mounted on the wall near the alarm system connection.

Plug the adapter into a 220-240 Volt wall socket and connect the plug to the nurse alarm system. The receiver unit is now able to relay the alarm signal to the alarm system.

2.2 Zendunit

Bevestig de zendunit op de plaats waar de Vloermat neergelegd wordt. Zorg dat de schakelaar op stand **UIT** staat.

2.3 Vloermat

De Vloermat wordt zodanig neergelegd dat de patiënt / bewoner er niet gemakkelijk langs kan gaan staan. Verbind vervolgens de jackplug van de mat met de zendunit. Werk de kabel netjes weg, zodat eventuele valmogelijkheden zoveel mogelijk uitgesloten worden.

De installatie is compleet. Het systeem kan nu getest worden.

2.4 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze gebruikt te worden:

- Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.
- In ruststand is de LED van de ontvangstunit uit. Wanneer de patiënt/bewoner op de mat gaat staan licht de LED rood op, het oproepsysteem wordt geactiveerd en de LED knippert gedurende 5 seconden.
- Het Vloeralarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de *UIT*-stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.

STORINGSWIJZER.

- Opmerking 1:** Belangrijk is dat de Vloermat **niet gevouwen** wordt.
- Opmerking 2:** Het Vloeralarm is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 37-121)
De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.
- Opmerking 3:** Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de *UIT*-stand staat.
- Opmerking 4:** Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de *UIT*-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Controleer echter bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

- De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.
- Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:
 - ... Zorg dat er niemand op de mat staat
 - ... Zet de zendunit van *UIT* naar *AAN*.
 - ... Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.